

MODE D'EMPLOI

EP720-01 / EP720-01SC / EP720-02 / EP720-02SC

Chère cliente, cher client,

Epilady vous félicite d'avoir acheté l'Epilaser pour une épilation par laser, et nous sommes convaincus que vous serez satisfait des résultats obtenus.

Cet appareil utilise une technologie avancée de laser par infrarouge.



Un faisceau laser vient impacter le poil et le follicule sous la surface de la peau. Lors de l'impact, le faisceau chauffe le follicule, l'affaiblissant et perturbant sa future repousse.

En cas d'impact partiel, le follicule reste tout de même affaibli, et le nouveau poil sera plus fin et plus doux mais nécessitera un nouveau traitement.

Epilaser est un accessoire indispensable de votre trousse de beauté.

Remarque : Le mode d'emploi est destiné à la fois aux hommes et aux femmes. Le genre féminin est utilisé par commodité.

Contenus

1. Introduction	2
2. Certificats de conformité	4
3. Consignes de sécurité	5
4. À qui est destiné cet appareil ?	6
5. Contre-indications.....	6
6. Informations importantes.....	7
7. Version sans écran	7
8. Version avec écran	8
9. Description générale de l'appareil	9
10. Instructions générales de mise en marche.....	10
11. Mise sous tension	10
12. Témoins lumineux.....	11
13. Prétraitement – Préparation de la peau	12
14. Utilisation de l'appareil	14
15. Entretien	15
16. Résolution des problèmes.....	15
17. Informations techniques	16
18. Garanties.....	16
19. Environnement	18

Certificats de conformité

Tous les composants et matériaux utilisés pour la fabrication de l'Epilaser sont conformes aux normes internationales.

L'entreprise déclare par la présente que l'Epilaser est conforme aux certificats suivants :

- IEC 60825.1 "safety of Laser Products".
- LVD
- CE-EMC
- CDRA
- IEC 62471/ Photobiological

Normes environnementales

- ROHS

Précautions importantes

Pour utiliser votre appareil en toute sécurité, veuillez lire attentivement la notice, et suivre les instructions d'utilisation.



Ce symbole, partout où il est utilisé dans la brochure, indique la présence de consignes de sécurité qui doivent être appliquées.

Consignes de sécurité



Cessez toute utilisation dans le cas où votre appareil serait endommagé, fêlé ; contactez le distributeur auprès duquel l'achat a été effectué.



Ne mouillez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un milieu humide, comme la douche.



Ne pointez pas l'appareil en direction de vos yeux ou ceux d'une autre personne. Abstenez-vous de regarder directement dans l'appareil.



N'utilisez pas l'appareil sur les zones suivantes : muqueuses, intérieur des narines, intérieur des oreilles, cils et paupières. N'utilisez pas l'appareil sur les parties génitales, l'anus ou autour des tétons.



Lorsque vous utilisez l'appareil, vous pouvez ressentir un léger picotement. Cela signifie que le faisceau laser a atteint la racine. Cependant, si l'appareil entraîne des douleurs, des brûlures de l'épiderme, des rougeurs, une inflammation ou toute autre réaction indésirable, cessez d'utiliser l'appareil et contactez notre service : contact@homebeautysense.com



Ne laissez jamais d'enfant utiliser cet appareil. Ce produit n'est pas destiné à une utilisation par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances.

À qui est destiné cet appareil ?

Aux personnes avec une couleur de peau de niveau III et moins



Et pour toute couleur de poils (y compris les poils blancs) ; plus spécifiquement :



- Références : EP720-01 & EP720-01SC : poils foncés
- Références : EP720-02 & EP720-02SC: toutes les couleurs de poils

Aux personnes âgées de plus de 15 ans




Utilisable sur corps et sur visage (reportez-vous aux consignes de sécurité)



Contre-indications

- Les personnes à la peau foncée supérieur au niveau III
- Les femmes enceintes ou qui allaitent.
- Les personnes ayant récemment suivi un traitement utilisant les substances suivantes: acides alpha-hydroxylés, AHAs, BHAs, Retin-A®, étinoïdes topiques, acide azélaïque, Accutane®.
- Les personnes souffrant d'un cancer de la peau.
- Les personnes à la peau photosensible.
- Les personnes à la peau infectée ou souffrant d'une maladie cutanée, comme le psoriasis.
- Les personnes souffrant de maladies aggravées par la chaleur, telles que l'herpès, dans les zones traitées.
- Les personnes qui ont suivi un traitement chirurgical, médicamenteux ou de gommage sur la zone traitée dans les trois mois précédents, ou si la zone traitée est encore en phase de cicatrisation.

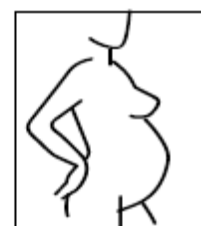

- Les personnes allergiques à l'hydroquinone ou tout autre agent de blanchiment.

Informations importantes à lire avant l'utilisation

L'appareil est disponible sous deux versions – la version sans écran et la version avec écran. Dans tous les cas, seuls les accessoires inclus dans la boîte doivent être utilisés. Tout remplacement de câble USB, bloc d'alimentation ou écran doit être réalisé uniquement auprès du service après-vente du distributeur chez qui l'appareil a été acheté.

Version sans écran (EP720-01/EP720-02)

Le produit que vous avez acheté inclus une carte plastifiée pour port USB ou une clé USB, qui installera automatiquement le logiciel d'utilisation ainsi qu'une vidéo expliquant comment utiliser l'appareil.



- a. Connectez la carte d'installation du logiciel à votre ordinateur via un port USB ou téléchargez l'application sur votre smartphone.
- b. Rechargez l'appareil en le connectant à votre ordinateur via le câble USB.
- c. Vous visualiserez son utilisation en lançant l'application.

Nous vous conseillons de regarder cette vidéo avant toute utilisation.

Cette vidéo est consultable sur le site www.epilady.eu

Version avec écran (EP720-01SC/EP720-02SC)

Lorsque vous allumez pour la première fois l'écran, ce dernier vous invitera à regarder une vidéo de démonstration sur l'utilisation de l'appareil. Nous vous recommandons de d'abord regarder la vidéo, que vous pouvez aussi consulter sur notre site www.epilady.eu

- a. Assurez-vous que l'écran fourni et l'appareil soient chargés, si ce n'est pas le cas, connectez votre Epilaser à l'écran, lui-même relié au bloc d'alimentation et ce afin de les charger.
- b. Connectez l'Epilaser à l'écran à l'aide du cordon prévu à cet effet. (Ce cordon permet aussi une connexion de l'appareil à un smartphone équipé de la technologie Android).
- c. Maintenez le bouton marche/arrêt quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume. Une fois sous tension, un symbole pour lancer la vidéo s'affiche.



Nous vous conseillons de regarder cette vidéo avant toute utilisation.

Cette vidéo est consultable sur le site www.epilady.eu

- d. Pour éteindre l'écran, maintenez appuyé environ 10 secondes le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.


Vous pouvez aussi connecter l'Epilaser sur un autre support tel qu'un ordinateur ou un smartphone Android. Pour se faire, vous devez :

- a. Insérer la carte plastifiée ou la clé au port USB de votre ordinateur ou téléchargez l'application sur votre smartphone.
- b. S'assurer que l'Epilaser soit chargé.
- c. Connectez l'Epilaser à un ordinateur à l'aide du câble USB ou à un smartphone Android avec le cordon dédié.

Description générale du produit


Description détaillée des pièces de l'appareil:

1. Appareil
2. Câble USB de connexion Epilaser / ordinateur
3. Câble connexion Epilaser écran fourni et/ou téléphone Android
4. Chargeur (version avec écran)
5. Écran (version avec écran uniquement)
6. Carte plastifiée ou clé USB d'installation du logiciel via port USB
7. Mode d'emploi

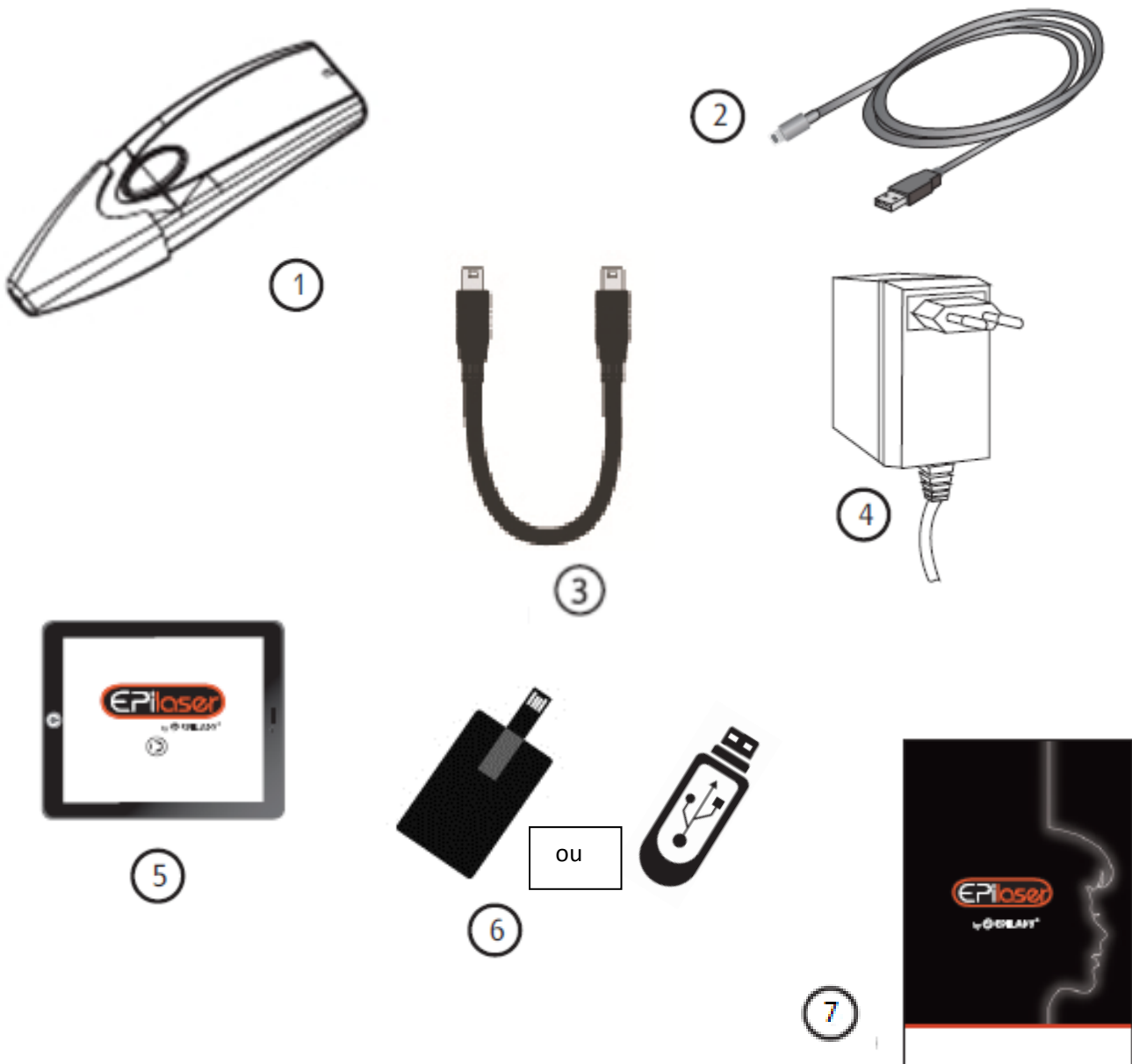

Instructions générales de mise en marche


- (1) Cache de protection du laser
- (2) Clé de verrouillage - l'appareil ne peut fonctionner que lorsque la clé est installée et enclenchée dans « la serrure » dédiée.

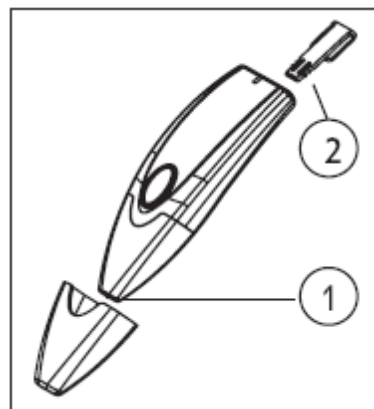

Après utilisation, retirez la clé et conservez-la séparément afin d'éviter une utilisation non autorisée de l'appareil, telle qu'une utilisation accidentelle par des enfants.

Mise sous tension


- a. Appuyez sur le bouton d'alimentation (3) pendant 2 secondes pour mettre l'appareil sous tension.
- b. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour mettre l'appareil hors tension.
- c. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyer sur le bouton pour activer le laser, uniquement lorsque l'appareil est en contact avec la peau. L'appareil ne fonctionnera pas s'il n'est pas en contact avec la peau.

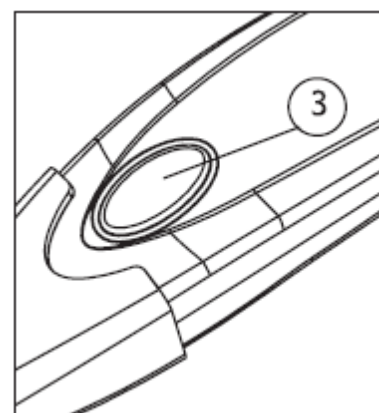


Attention :

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant 2 minutes au moins, il s'éteint automatiquement

Témoins lumineux

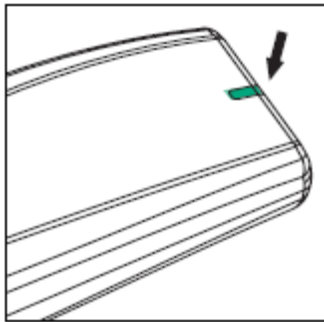


Vert lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur ou à l'écran est prêt à être utilisé.

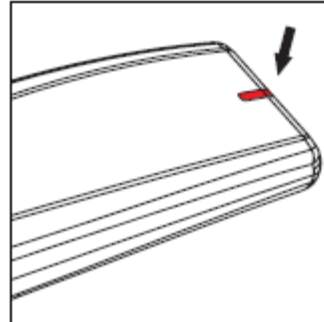


Rouge lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur ou à l'écran, mais que l'écran ou l'ordinateur est éteint.

Bouton de déclenchement laser

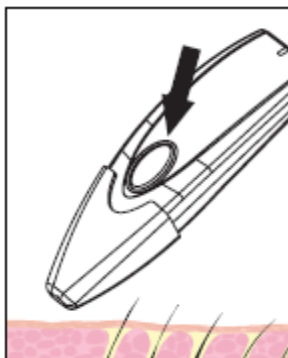

Eteint lorsque l'appareil n'est pas en contact avec la peau.

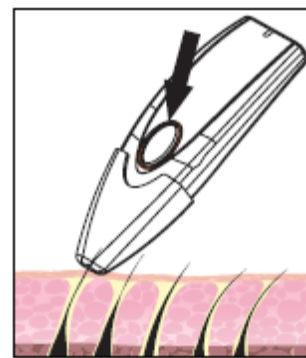


Orange lorsque l'appareil est bien en contact avec la peau.

Port USB

Le port USB est situé au bout de l'appareil.

* Le câble est connecté à l'appareil par une extrémité et à l'ordinateur par l'autre.

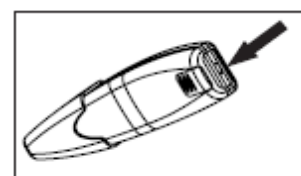

Prétraitement - Préparation de la peau



Pour des résultats optimaux, suivez ces étapes :

1. Utilisez une lingette humide pour nettoyer la zone de tout résidu de maquillage ou de crème (de préférence environ deux heures avant le traitement).
2. Ne retirez pas les poils en utilisant une pince à épiler/de la cire/un épilateur avant le traitement.
3. Ne rasez pas ; il est préférable que les poils soient visibles hors de la peau.
4. Si vos poils sont trop longs, il est recommandé de les couper à une longueur entre 1 et 2 mm avec des ciseaux / une tondeuse. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois (uniquement pour la première fois), effectuez un test pour vérifier la compatibilité de la peau. L'objectif de ce test est de vérifier que l'appareil est bien adapté à votre peau et que celle-ci réagira correctement et naturellement au traitement par laser.




Lorsque vous effectuez le test pour la première utilisation, suivez ces étapes :

1. Choisissez une partie couverte de votre corps, par exemple la cuisse.
2. Connectez l'appareil au le câble prévu à cet effet.
3. Connectez l'autre partie du câblé à l'écran ou à un ordinateur.

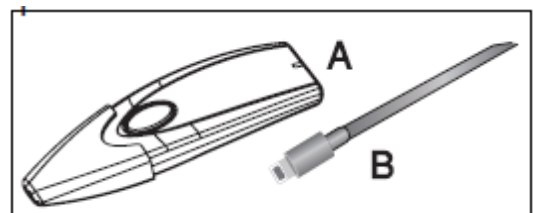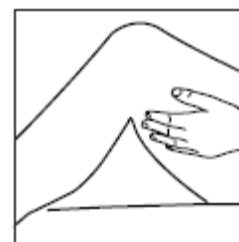


4. Appuyez sur le bouton on/off pendant deux (2) secondes pour mettre l'appareil sous tension – la lumière verte clignotera trois (3) fois. La lumière de chargement sera allumée – verte ou rouge, en fonction de l'état de chargement de la batterie.

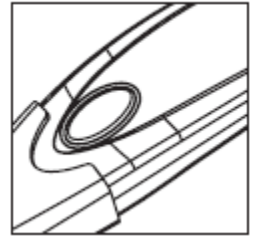

5. Cliquez sur le symbole qui apparaît sur votre bureau. Une vidéo s'ouvrira sur l'écran.



6. Traitez les différents points dans la zone masquée que vous avez choisie. Vous pouvez sentir un léger picotement dans la zone traitée, il s'agit d'une réaction naturelle. Si le picotement est intense, cessez l'utilisation de l'appareil.

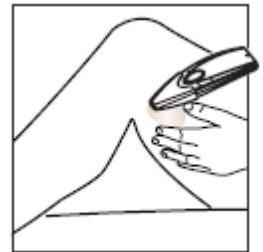

7. Après cinq (5) minutes, vérifiez l'aspect de la zone traitée. Si vous remarquez un changement de la couleur de la zone traitée, veuillez demander un avis médical.

8. Patientez 24 heures et vérifiez à nouveau les zones traitées. Si vous remarquez un changement de la couleur de la peau, alors l'appareil n'est pas adapté à votre peau et vous êtes sensible aux traitements par laser.



9. Après le test, laissez l'appareil connecté à l'écran ou l'ordinateur afin qu'il charge complètement.



Utilisation de l'appareil

Après vous être assurée que votre peau réagit correctement au laser, vous pouvez passer à l'étape opérationnelle :

1. Mettez l'appareil sous tension comme vous l'avez fait pendant la phase de test.

2. Placez l'appareil sur votre peau à l'endroit où vous souhaitez effectuer le traitement.

3. Vous verrez une image de votre peau et de vos poils sur l'écran. Identifiez la lumière au centre de l'écran. C'est l'endroit où le laser

commencera le traitement une fois activé par une pression sur le bouton on/off.

4. Pour chaque poil, suivez les étapes ci-dessous :



a. Faites glisser doucement l'appareil sur votre peau jusqu'à ce que la lumière à l'écran cible la racine du poil que vous souhaitez éliminer.

b. Assurez-vous que l'appareil soit bien en contact avec votre peau et appuyez sur le bouton on/off. Vous remarquerez à cet instant un flash sur l'écran.

5. Afin d'optimiser votre traitement, nous vous recommandons d'effectuer trois tirs laser sur le poil à traiter et ce en continu. Le poil tombera de lui-même au bout d'un certain temps.

6. Lorsque le traitement est terminé, mettez l'appareil hors tension en appuyant sur le bouton on/off pendant deux (2) secondes.


7. Si la lumière est rouge, laissez l'appareil connecté afin qu'il soit rechargé. Lorsque la

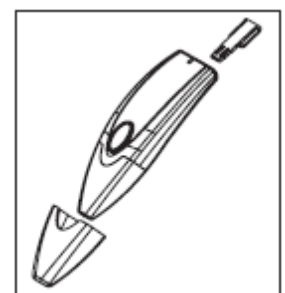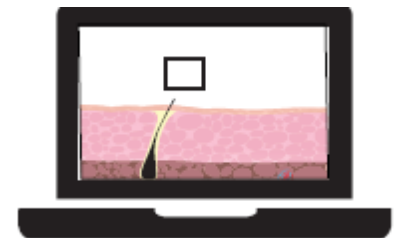



lumière est verte, cela signifie qu'il est pleinement chargé.

8. Lors du chargement, retirez la clé de verrouillage pour empêcher toute utilisation non autorisée de l'appareil.

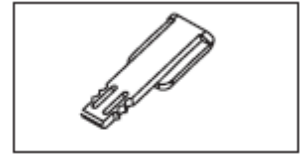


9. Déconnectez l'appareil du port USB une fois le chargement terminé.

10. Entrez l'appareil dans une boîte fermée hors de portée des enfants et conservez la clé de verrouillage dans un endroit séparé.

Entretien

Nettoyez votre Epilaser après chaque utilisation. Utilisez un coton tige sec pour nettoyer le pourtour de la fenêtre laser qui est en contact avec la peau. Ne pas insérer le coton tige à l'intérieur de l'appareil. Ne pas mouiller.

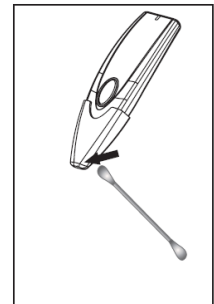

Résultats

Le processus d'élimination des poils diffère en fonction de chaque personne.

Après plusieurs traitements, vous remarquerez une élimination significative des poils.

Résolution des problèmes

Problème	Solution
L'image est noire et le bouton d'alimentation ne fonctionne pas	Maintenir appuyer le bouton d'alimentation
L'indicateur lumineux est rouge	Rechargez à nouveau l'appareil
L'indicateur lumineux reste rouge malgré plusieurs heures de charge	Rapprochez-vous du service après-vente de l'enseigne où vous avez acheté l'appareil

Informations techniques

Caractéristiques optiques	
Type de laser	Laser à diode
Type de laser	1
Longueur d'onde	810nm (01-01CS) / 660nm (02-02SC)
Dosage	30 J/ cm ²
Caractéristiques électriques	
Caractéristique de la batterie	5V DC , 0.12 A
Caractéristiques mécaniques	
Poids	197 gr (01-02) / 570 gr (01SC-02SC)
Dimensions de la boîte	210x145x65 / 275x185x65 mm (SC)
Opération et stockage	
Température	Opération 10 ⁰ - 40 ⁰ Stockage -20 ⁰ - 50 ⁰
Taux d'humidité relatif	Opération 30%-70% Stockage 10%-90%

Garantie commerciale

La garantie et le service après-vente ne sont valides que dans le pays d'achat.

Si l'appareil tombe en panne au cours de la première année après l'achat, contactez le point de vente où vous avez acheté l'appareil : dès lors que vous avez utilisé et manipulé l'appareil en suivant les instructions, et que le problème ne résulte pas d'une mauvaise

manipulation ou d'un mauvais entretien. La garantie ne couvre pas l'usure des pièces dans le cadre d'une utilisation normale. La garantie ne couvre pas les dégâts subis lors de la livraison, lors d'une chute de l'appareil ou d'une utilisation inappropriée.

Si l'appareil ne fonctionne pas, lisez le mode d'emploi pour vous assurer d'avoir bien suivi les instructions. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, contactez le point de vente où vous avez acheté l'appareil. Seul un agent du service après-vente agréé est autorisé à réparer l'appareil. Sinon, vous pouvez nous contacter par email à :

contact@homebeautysense.com

Garantie légale

Indépendamment de cette garantie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues au Code de la consommation et aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

- Article L 211-4 du Code de la consommation : « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisé sous sa responsabilité ».
- Article L211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1 Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; présenter les qualités d'un acheteur peut

légitimement attendre un égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2 Ou présenter les caractéristiques définie d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

- Article L211-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
- Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
- Article 1648 alinéa 1 du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compte de la découverte du vice ».

Protéger l'environnement



Le symbole apposé sur ce produit indique qu'en Europe, les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires car ils nuisent à l'environnement et peuvent être dangereux pour la santé. Il est de votre responsabilité de déposer votre appareil dans un site de recyclage près de chez vous, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit pour obtenir plus d'information.